

FOBT (Kakaibang Pagsusuri ng Dugo sa Dumii) Mga Tagubilin

Kung malalaman nang maaga, ang colorectal kanser ay maaaring magamot sa 9 sa 10 katao. Dahil sa walang nakikitang senyales o sintomas sa umpisa, ang simple at madaling pagsusuri ay maaaring makatulong iligtas ang iyong buhay. **Mangyaring basahing lahat ang mga tagubilin.**

A. Bago Ka Mag-umpisa

	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29
30					

Mahalaga: Kailangan mong ipadala kaagad ang test card kapag nakumpleto na ang 3 flaps at hindi dapat lalampas ng 10 araw pagkatapos kolektahin ang unang dumi.




Umiwas sa mga karagdagang bitamina C at maaasim na prutas at juice ng **tatlong araw bago** ng pagsusuri at sa **panahon** ng pagkolekta ng muwestra ng dumi.



Kung hindi, ituloy ang pagkain ng iyong karaniwang diyeta at inumin ang iyong regular na niresetang mga gamot.






B. Pagsulat sa Test Card

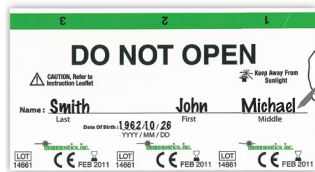

- Gamit ang isang bolpen, isulat ang iyong pangalan at petsa ng kapanganakan sa test card, tulad ng nakikita sa iyong health card.

- Ikaw ay kukuha ng muwestra ng dumi sa tatlong magka-ikabang araw sa loob ng sampung araw.
- Ang test card ay may tatlong mga lalagyan ng muwestra o flap – isa para sa bawat araw. Magbukas lamang muna ng isang flap.
- Sa ilalim ng bawat flap ay may dalawang maliit na lugar kung saan ipapahid ang iyong mga muwestra.

C. Paggawa ng Pagsusuri

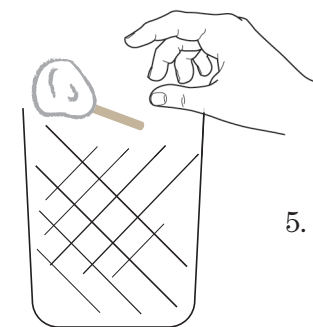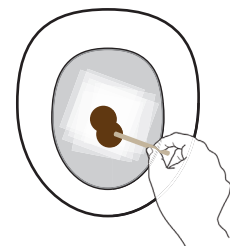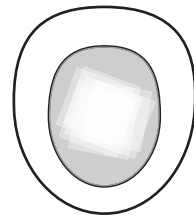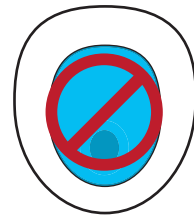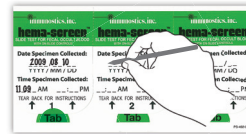

- Isulat ang petsa (taon/buwan/araw) at oras ng iyong unang koleksyon ng muwestra sa flap 1. Hilahin ang flap para mailagay ang unang muwestra.
- I-flush ang inidoro upang malinis ito. Huwag gumamit ng mga inidoro na may mga panlinis ng inidoro tulad ng mga nagkukulay asul na panlinis.
- Para makakolekta ng dumi, gumamit ng isang malinis, at madaling itapong lalagyan o maglagay ng patong-patong na toilet paper sa tuyong bahagi ng inidoro upang masuportahan ang dumi.
- Gamitin ang applicator stick para makakolekta ng maliit na muwestra ng dumi. Maglagay ng **napakanipis na pahid** sa Area I. Gamitin ang parehas na stick para makakolekta ng pangalawang muwestra mula sa ibang lokasyon ng dumi sa Area II. Isara at siguraduhing nakasara ng mabuti ang flap.




- Balutin ng isang pirasong toilet paper ang applicator stick at itapon ng maayos. I-flush ang inidoro. Ikaw ay tapos na sa unang muwestra!

- Ilagay ang test card sa foil-lined na sobre at ilagay sa room temperature hanggang sa iyong susunod na pagdumi. Huwag munang isara ng lubusan ang sobre hanggat hindi mo natatapos lahat ang 3 araw.
- Ulitin ang paraan 1-6 upang makakolekta ng pinahid na muwestra sa karagdagang dalawang araw sa ilalim ng flap 2 at 3 ng naaayon.

D. Pagkatapos ng Pagsusuri

Porma ng Rekisasyon

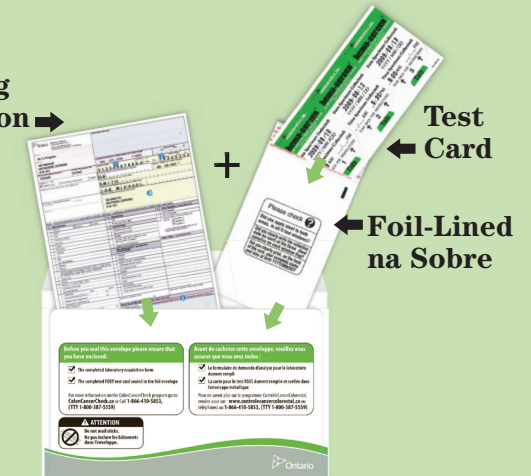

- Ilagay lamang ang kard ng pagsusuri sa loob ng foil-lined na sobre at isara ng mahigpit.
- Ilagay ang foil-lined na sobre at ang nakompleto ng pormang rekisasyon mula sa iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa loob ng ibinigay na sobre.
- Ipadala sa koreo o ihulog ang sobre sa isang koleksyon senter ng pangkomunidad na laboratoryo.

Kailangan ng tulong? Anumang katanungan? Pumunta sa:
ontario.ca/coloncancercheck
 O tumawag sa **1-866-410-5853** (TTY 1-800-387-5559)